

PORENREINIGER KILPOR 2.0



Modell-Nr.: XN-803030

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Produkts sorgfältig durch, um eine fehlerhafte Handhabung des Geräts zu vermeiden. Bitte verwenden Sie das Produkt immer gemäß dieser Anleitung, um mögliche Produktschäden oder Verletzungen zu vermeiden. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Produkteinführung

Dieser Porenreiniger wurde entwickelt, um mittels Vakuumunterdruck verstopfte Hautporen von Hautfett, Verschmutzungen oder Hautschüppchen zu befreien. Der transportable Porenreiniger wird mit vier austauschbaren Saugköpfen geliefert und verfügt über vier verschiedene Funktionen, die sich zum Hautpeeling, der Gesichtstraffung, der Porenreinigung und der Faltenminimierung eignen. Der Porenreiniger Kilpor 2.0 verfügt über 5 unterschiedliche Saugmodi, um den Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht zu werden.

Tehnične specifikacije

Modellnummer: XN-8030
Produktgröße: 180 x 40 x 39 mm
Leistung: 0,7 Watt
Eingangsspannung: DC 5 V

Nennstrom: ≤ 500 mA
Batteriekapazität: 1000 mA
Ladezeit: ca. 90 Minuten
Betriebsdauer: ca. 2,5 Stunden

Lieferumfang

1. Das Hauptgerät (1 x)
2. Vier multifunktionale Aufsätze (1 x großer Rundlochkopf, 1 x kleiner Rundlochkopf, 1 x Ovallochkopf, 1 x Spezialkopf)
3. Packung mit Schwämmen und Gummiringen
4. USB-Ladekabel (1 x)
5. Gebrauchsanweisung (1 x)



Gerätebeschreibung



1. Aufsatz (wählbar)
2. Ein- / Ausschalter mit fünf verschiedenen Stufen
3. LED-Ladeanzeige
4. Ladekabel



Zum Aufladen des Porensaugers schließen Sie diesen bitte mittels eines USB Kabels an eine entsprechende Steckdose oder einen Computer an. Der Ladefortschritt lässt sich anhand des Lämpchens ablesen: ROT = wird geladen, GRÜN = vollständig aufgeladen.

Verwendung der Aufsätze

Die vier verschiedenen Aufsätze:



Schöne Haut durch den Spezialaufsatz (Mikrokristall)

Der künstliche, mikrokristalline Partikelkopf wurde entwickelt, um abgestorbene Hautzellen schonend zu entfernen.

Aufsatz mit großer Öffnung (starke Saugwirkung)

Dieser Aufsatz mit starker Saugkraft eignet sich in erster Linie dazu, Mitesser einmal wöchentlich bei einer Gesamtanwendungsdauer von fünf Minuten (hauttypabhängig) von Hautfett, Staub oder Kosmetikrückständen zu befreien. Personen mit empfindlicher oder dünner Haut sollten den Aufsatz nur mit Vorsicht anwenden.



Aufsatz mit kleiner, runder Öffnung (schwache Saugwirkung)

Dieser Aufsatz mit schwacher Saugwirkung kann verwendet werden, um Mitesser empfindlicher Haut von Öl, Staub, und Kosmetikrückständen usw. zu befreien.

Elliptischer Aufsatz (schwache Saugwirkung)

Dieser Aufsatz mit seiner kleinen, elliptischen Öffnung kann für die tägliche Hautpflege verwendet werden. Er eignet sich dabei insbesondere für tiefere Falten um die Augen oder den Mund herum und erzielt gute Ergebnisse indem die Haut mehrfach kurz angesaugt und wieder losgelassen wird.



WARNHINWEISE


1. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass Ihr Gesicht und Ihre Hände trocken und frei von Wasser oder anderen Flüssigkeiten sind, da der Porenreiniger durch eintretende Flüssigkeit beschädigt werden kann.
2. Stellen Sie sicher, dass der trockene Filterschwamm richtig in den Filterbecher eingesetzt wurde und kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit in ihn eingetreten sind, da diese Flüssigkeiten die im Gerät befindliche Saugvorrichtung während der Benutzung dauerhaft schädigen könnte.
3. Der Porenreiniger ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder unzureichender Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen zur Bedienung des Geräts. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
4. Der Porenreiniger ist nicht für die Anwendung von Körperregionen bestimmt, die einer Operation unterzogen werden oder wurden oder die über Narben verfügen. Schwangere Frauen oder Personen mit Herzerkrankungen sollten den Porenreiniger nicht verwenden.
5. ACHTUNG! Saugen Sie mit dem Porenreiniger niemals Wasser auf oder reinigen diesen unter fließendem Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
6. Tragen Sie während der Verwendung des Porenreinigers keine Halsketten, Ohringe, Gesichtsschmuck oder andere Arten von Schmuck, die unbeabsichtigt angesaugt werden könnten.
7. Sollten Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren, so stellen Sie die Verwendung des Porenreinigers bitte sofort ein.
8. Bei diesem Porenreiniger handelt es sich ausdrücklich um KEIN medizinisches Produkt. Aus diesem Grund stellen die in dieser Gebrausanweisung ausgesprochenen Anwendungsempfehlungen weder einen medizinischen Rat, noch eine Diagnose oder einen Behandlungsvorschlag dar und jede Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
9. Da der Porenreiniger nicht wasserdicht ist, sollte er nicht unter der Dusche oder in der Badewanne verwendet werden und auch nicht unter fließendes Wasser gehalten werden.
10. Lagern Sie den Porenreiniger nicht im Badezimmer oder in einem Raum mit hohem Feuchtigkeitsaufkommen.
11. Bewahren Sie den Porenreiniger nicht in der Nähe von Wärme- oder Feuerquellen auf.
12. Bewahren Sie den Porenreiniger stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Gerät ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern benutzt werden.
13. Verwenden Sie den Porenreiniger nicht auf gereizten Hautpartien und stellen Sie die Anwendung beim Auftreten von Hautreizungen unverzüglich ein.
14. Bitte verwenden Sie den Porenreiniger im Bereich rund um Ihre Augen nur mit größter Vorsicht.
15. Der Porenreiniger ist nur für den Haushalts- und Trockengebrauch bestimmt.
16. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne korrekt angebrachtem Aufsatz.
17. Befreien Sie das Gerät regelmäßig von Verstopfungen durch Staub, Flusen, Haaren oder Ähnlichem, da diese die Saugleistung des Geräts und/oder die allgemeine Leistung stark beeinträchtigen können.
18. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.
19. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, einen heftigen Schlag erhalten hat, einer Überspannung ausgesetzt war, es heruntergefallen ist, beschädigt ist, im Freien vergessen wurde oder ins Wasser gefallen ist.
20. Schalten Sie das Gerät nicht während der Reinigung oder dem Austausch des Zubehörs ein.
21. Versuchen Sie im Falle einer Fehlfunktion und/oder einer Beschädigung nicht, diese selber zu reparieren und stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen ordnungsgemäß entsorgt wird

Die Installationsschritte der Aufsätze

Legen Sie den Filterschwamm wie abgebildet in den Filterbecher ein;



Entfernen Sie zunächst den Saugkopf. Nehmen Sie den Saugkopf und drehen Sie ihn leicht im Uhrzeigersinn, während Sie ihn dabei herausziehen.

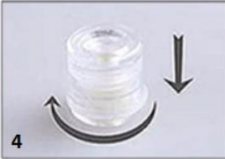

Im Anschluss daran nehmen Sie den Deckel der Düse und drehen Sie ihn ebenfalls im Uhrzeigersinn, während Sie ihn dabei gleichzeitig herausziehen.



Entfernen Sie den alten Filterschwamm und setzen Sie einen neuen Filterschwamm in den Filterbecher ein.

Achten Sie darauf, dass der Filterschwamm gut sitzt. Setzen Sie die Düsenkappe wieder auf (drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um sie wieder zu schließen).

Nun können Sie den Saugkopf wieder befestigen. Nehmen Sie den Kopf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er wieder an der Düse anliegt

Sollte der Silikonring oder der Filterschwamm beschädigt oder verschmutzt sein und ausgetauscht werden müssen, so ersetzen bzw. tauschen Sie ihn wie oben beschrieben aus.

Vor dem Gebrauch

Hinweis: Bitte befolgen Sie die richtige Anwendung!

Vor der Anwendung des Produkts müssen Sie die Poren mit heißem Wasser (vorzugsweise durch das Auflegen eines feuchtwarmen Handtuchs) öffnen, damit der Schmutz leichter herausgesaugt werden kann.

- Bereiten Sie zusätzlich ein fünfminütiges Dampfbad vor oder tragen eine Mitesser-Entfernungscreme auf Ihrer Haut auf, damit sich Ihre Poren vollständig öffnen können, um das beste Ergebnis zu erzielen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Poren nach einem heißen Bad oder dem Sport vollständig geöffnet bleiben und halten Sie Ihr Gesicht feucht.
- Bewegen Sie den Porensauger langsam über die Haut, **ohne zu lange an einem Bereich zu verbleiben, um die Haut nicht zu verletzen und um überschüssiges Fett und Mitesser herauszusaugen**. Sollte sich ein Mitesser oder ein Pickel relativ tief in der Haut befinden, so ist es ratsam, diesen zuvor mit einer entsprechenden Creme oder Lotion einzureiben.
- Im Nachgang zur Behandlung empfiehlt es sich, eine kühlende Hautcreme oder einen Toner aufzutragen, der die Poren wieder verkleinert.



Schritt-für-Schritt-Anleitung



SCHRITT 1: Entfernen Sie Ihr Make-up und reinigen Sie Ihr Gesicht.

SCHRITT 2: Verwenden Sie ein warmes Handtuch und/oder bereiten Sie ein Gesichtsdampfbad vor, um die Poren zu öffnen.

SCHRITT 3: Tragen Sie eine porenöffnende Lotion auf, um Mitesser später leichter herauslösen zu können.

SCHRITT 4: Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen einen der vier Saugköpfe aus. Beginnen Sie Ihre Gesichtsbehandlung zuerst mit der niedrigsten Saugleistung.

SCHRITT 5: Bewegen Sie den Porenreiniger mit konstanter Geschwindigkeit in eine Richtung, um die Poren zu reinigen, und bleiben Sie nicht mehr als drei Sekunden an einem Bereich, um Rötungen oder Verletzungen der Haut zu vermeiden und drücken oder ziehen Sie dabei niemals zu stark mit dem Porenreiniger an Ihrer Haut.

SCHRITT 6: Nach der Gesichtsreinigung verwenden Sie am besten ein Eistuch, kaltes Wasser oder eine porenverkleinernde Flüssigkeit oder Lotion, um die Porengröße wieder zu minimieren und tragen Sie eine Gesichtsmaske auf, um die Gesichtshaut wieder zu beruhigen

Für welche Saugkraftstufe sollten Sie sich entscheiden?

Der Porenreiniger ist für eine Vielzahl von Hauttypen geeignet. Die geringsten Stufen, Stufe 1 und Stufe 2, eignen sich für empfindliche und trockene Haut. Sollten Sie den Porenreiniger zum ersten Mal verwenden, so benutzen Sie bitte den Aufsatz mit der kleinsten Öffnung. Die mittlere Stufe, Stufe 3, eignet sich für neutrale Haut. Stufe 4 eignet sich für die Anwendung bei fettiger Haut und die Stufe mit der höchsten Saugleistung, Stufe 5, eignet sich am besten für Mischhaut mit großen Poren.

Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Porenreiniger auf niedriger Stufe, der Stufe eins, zu starten.

Drücken Sie den Netzschalter zweimal, um den Porenreiniger auf Stufe zwei zu starten.

Drücken Sie den Netzschalter dreimal, um den Porenreiniger auf mittlerer Stufe, der Stufe drei, zu starten.

Drücken Sie den Netzschalter viermal, um den Porenreiniger auf Stufe vier zu starten.

Drücken Sie den Netzschalter fünfmal, um den Porenreiniger auf Stufe fünf zu starten und sechsmal, um das Gerät auszuschalten.

Dermaabration der Gesichtshaut

- 1) Setzen Sie den Spezialkopf auf, reinigen Sie die Gesichtshaut und tupfen Sie sie im Anschluss daran ab.
- 2) Beginnen Sie im Bereich des Kinns und bewegen das Gerät seitlich entlang des Kiefers von unten nach oben.
- 3) Im Anschluss daran bewegen Sie es waagrecht seitlich der Nase und unterhalb der Wangenknochen von der Mitte in Richtung Ohren.
- 4) Auf der Stirn führen Sie gleichmäßige Bewegungen von der Mitte zu den Seiten und dem Haaransatz aus.
- 5) Im Anschluss daran bewegen Sie das Gerät vorsichtig auf dem Nasenrücken von oben nach unten.

U

7

M

.

.

.

.



- 1) Um Mitesser, überschüssiges Fett oder Kosmetikreste zu entfernen, wählen Sie je nach Ihrem Hauttyp entweder einen Aufsatz mit einer kleinen Öffnung oder einen Aufsatz mit einer großen Öffnung.
- 2) Platzieren Sie die Öffnung des Aufsatzes in dem Bereich der Gesichtshaut den Sie behandeln möchten und bewegen den Porenreiniger sanft in eine Richtung und nicht hin und her, wobei Sie die bereits genannte Gesamtbehandlungszeit nicht überschreiten sollten.

Faltenpflege

- 1.) Für die Faltenpflege benötigen Sie den ellipsenförmigen Aufsatz.
- 2.) Umschließen Sie den Porenreiniger fest mit einer Hand und führen Sie den Porenreiniger in entspannender Weise entlang der feinen Fältchen im Bereich der Augenwinkel, der Nase und dem Mund.
- 3.) Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Porenreiniger jeweils kurz auf die zu behandelnden Bereiche aufzusetzen und wieder loszulassen.

Anmerkung:

- Bitte denken Sie daran, den Porenreiniger während der Anwendung immer in Bewegung zu halten und nicht zu lange an einer Stelle zu verweilen.
- Bereiten Sie die Anwendung gründlich vor, indem Sie die Poren mittels eines fünfminütigen Dampfbads oder mit einer
- Mitesserentfernungscreme auf die Anwendung vorbereiten, um das beste Ergebnis zu erzielen.

ACHTUNG: Bitte betätigen Sie den Porenreiniger während einer Sitzung nicht immer an der gleichen Stelle, da die empfindliche Gesichtshaut schnell gereizt reagieren kann oder sich rote oder lilafarbige Flecken (Knutschflecken) bilden können. Sollten Sie eine solche Hautveränderung bemerken, so setzen Sie die Reinigung bitte nicht weiter fort und behandeln den Flecken abwechselnd mit einer kalten und heißen Kompresse oder suchen einen Arzt auf.

KORREKTE HANDHABUNG: Betätigen Sie das Gerät niemals zu lange an einer Stelle, da die **Maximalbehandlungsdauer pro Bereich nur 3 Sekunden** beträgt. Verwenden Sie den Porenreiniger niemals senkrecht, sondern bewegen ihn immer horizontal auf oder ab oder vertikal von links nach rechts, oder umgekehrt, um Hautreizungen zu vermeiden.



Instandhaltung

Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch, indem Sie ihn mit warmem Wasser abspülen und lassen ihn an der Luft trocknen. Versuchen Sie nicht, das Hauptgerät durch das Spülen mit Wasser zu reinigen, da es nicht wasserdicht ist. Um das Hauptgerät zu reinigen, wischen Sie es einfach mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

HILFREICHE TIPPS

- Nach der Verwendung des Porensaugers sollten Sie darauf zu achten, die Stellen, an denen das Produkt verwendet wurde, mit einer Feuchtigkeitscreme zu versorgen.
- Verwenden Sie vor und nach der Anwendung keine Gesichtspeelings oder andere Peeling-Produkte.
- Drücken Sie den Porensauger während der Verwendung nicht stark auf die Haut, da seine Saugfähigkeit ausreicht, um die Poren effizient zu reinigen.

Leichte Rötungen sind normal und verschwinden nach kurzer Zeit.

HINWEIS: Der Porensauger kann bei trockener Haut einmal pro Woche verwendet werden. Bei fettiger und gemischter Haut zweimal pro Woche. Die Verwendungsdauer sollte nicht länger als fünf Minuten pro Gesamtanwendung betragen.

FEHLERBEHEBUNG:

- Sollte der Porenreiniger nicht funktionieren, so vergewissern Sie sich, dass der Saugkopf ordnungsgemäß aufgesetzt ist, oder überprüfen Sie, ob es eine Komponente gibt, die gereinigt werden muss.
- Sollte das Gerät langsamer arbeiten, so reinigen Sie bitte den Saugkopf und laden Sie das Produkt auf.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- oder Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.