

SMILY FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ

Használati utasítás

Model: YJK – 015A

A termék szerkezete



A termék kicsi és kényelmesen hordozható. Ez lehetővé teszi, hogy otthon tisztítsa meg a fogait. Ez a termék egy tiszta fejet használ, ugyanolyan felépítésű, mint a fogorvosoké. Hatékonyan eltávolíthatja a nyilvánvaló fogkövet, és bizonyos tisztító hatást gyakorol a fog lepedékére és a fogfoltokra is.

A termék jellemzői

- Professzionális ötvözetű fém tisztítófej, nagyon jó tisztító hatás.
- Ötféle módon állítható, különböző igényekhez.
- Intelligens nagyfrekvenciás rezgés, a fogkő hatékony eltávolítása és így tovább.
- Egész testű, gyönyörű és nagyvonalú kialakítás.
- Az akkumulátor tartós és praktikus.

Figyelmeztetés!


- A fogtisztító fém feje nem cserélhető.
- Ne tegye a termékeket közvetlen napfénybe. Helyezze -10 ° C és 40 ° C közötti beltéri környezetbe.
- Ne mossa vagy áztassa sokáig a terméket.
- A termékek csak felnőttek számára készültek. Használat után kérjük, tartsa őket megfelelően, tartsa távol a gyerekektől, hogy a gyermekek ne sérüljenek meg.
- A termék elemeket tartalmaz. Ne tegye a terméket tűzbe vagy magas hőmérsékletű edénybe a tűz vagy robbanás elkerülése érdekében.
- Termékminőségi probléma esetén ne szedje szét a terméket. Kérjük, javítás céljából küldje vissza az eredeti eladónak.

Termékleírás

Névleges feszültség: 3,7V	Névleges áram: 200mA
Akkumulátor-kapacitás: 300mAh	Készenléti áram: $\leq 20\mu\text{A}$
A termék mérete: 183,6x30x22,3 mm	A termék súlya: 53,6 g
Töltési feszültség: 5V	Motorzaj: $\leq 60\text{dB}$

Használata

Az első használat előtt több mint 2 órán keresztül kell tölteni, amíg teljesen fel nem töltődik. A bekapcsoláshoz nyomja meg az indítógombot, állítsa be a kulcs helyzetét a felső és az alsó beállítógombokkal (felfelé nyomva fokozódik a rezgés, lefelé pedig csökken) és kezdje meg a fogak tisztítását. A fogak megtisztítása után mossa le a fémfejet folyó vízzel. Tisztítsa meg a készüléket, és törölje le a fogtisztító testét is.

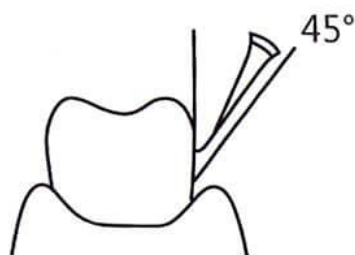

Töltés

1. Ez a termék egyenáramú interfész töltési módot használ, a felhasználó kiveszi a disztribúciós egyenáramú interfész töltővezetékét, az egyenáramú interfészt behelyezi a gép hátsó aljzatába, és az USB interfészt a töltő végébe.
2. A töltési módba lépés után a fogtisztító zárt állapotba kerül. Ekkor a gép leáll.
3. Töltés közben az alján lévő lámpa piros és zöld színűre vált, amikor teljesen feltöltődött.

