

## {SIX PACK} KÉSZLET

### 1. Hogyan működik az eszköz?

A(z) {Six Pack} készlet kevés áramot használ az izmok összehúzásához és gyengéd masszírozásához, vagy az izomerősítő hatáshoz:

- Lazítsa el a befeszített váll-, hát- és derékizmokat
- Javítsa az izomtónust
- Masszázs

### 2. Műszaki adatok:

Feszültség:	Lúgos elem 1,5V AAAx2EA
Működési módok:	A-F (6 mód)
Frekvencia:	1~100 Hz
Program időtartama:	12 perc
Kimenet:	Max. 9,8 mA
Méret:	21x10x2,3 cm
Súly:	57,4 g

### 3. Termékjellemzők:

#### 3.1. Alacsony frekvenciájú terápia


Az elektromosság segítségével a készülék alacsony frekvenciájú impulzust hoz létre, amely pozitív hatást gyakorol a testre. Állítsa be a kívánt intenzitást. Az alacsony frekvencia gyengéd, masszázsszerű hatással van a testre.

#### 3.2. 6 program közül választhat

3.2.1. Egyszerűen válasszon a 6 mód közül

3.2.2. A program 12 perc után automatikusan kikapcsol

### 4. Használat

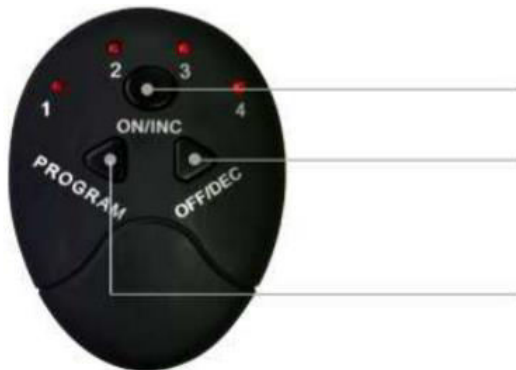


**ON/INC:** bekapcsolás/intenzitás növelése

**OFF/DEC:** kikapcsolás/intenzitás csökkentése

**PROGRAM:** a programok közötti váltás

A működési mód jelzői:

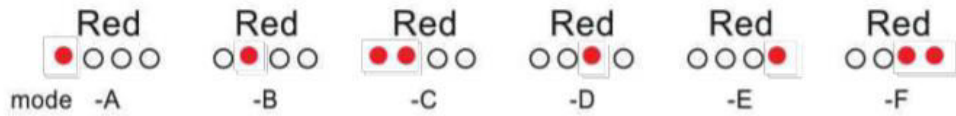

Amikor megnyomja a „bekapcsolás/intenzitás növelése“ gombot, a jelzőfény erősebb lesz, és ugyanígy, amikor megnyomja a „kikapcsolás/intenzitás csökkentése“ gombot, a jelzőfény gyengül.

- Mindkét gombnak 10 szintje van
- Programok közti váltás: 6 mód közül választhat (A~F)
- Ha lemerült az elem, akkor távolítsa el az elemtartó fedelét, és cserélje ki az elemet, majd helyezze vissza a fedelet.

#### 5. **A(z) {Six pack} készlet használata**

- Mindig tiszta és száraz bőrön használja
- Távolítsa el a védőfóliát a gélpárnákról
- Helyezze a készüléket a kívánt testrészre (has, láb, váll stb.)

**! NE KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET AZELŐTT, HOGY A TESTÉRE TENNÉ.**

**! NE ÉRJEN A RAGADÓS FELÜLETEKHEZ, EZZEL ELKERÜLHETI A GÉLPÁRNÁK ÉLETTARTAMÁNAK RÖVIDÍTÉSÉT.**

#### 6. **Első használat**

- Vegye ki a készüléket a dobozból
- Helyezze a készüléket a kívánt testrészre
- Válassza ki a kívánt programot
- Állítsa be az intenzitást
- A program időtartama 12 perc
- Többször nyomja meg a kikapcsolási gombot, egészen addig, amíg a jelzőfény kialszik

A készüléket legfeljebb 12 percig, naponta 2-3 alkalommal használja. Ha hosszabb ideig használja, fáradtnak érezheti magát.

Ne használja a készüléket étkezés után 30 perccel; a legjobb, ha a készüléket tiszta és száraz bőrön, tusolás után használja

#### 7. **Kezelés**

- Használat után kapcsolja ki a készüléket.
- Helyezzen egy védőfóliát a gélpárnákra, hogy azok ragadósak és tiszták maradjanak.

- Nedves ronggyal és gyengéd tisztítószerrel távolítsa el az eszköztől a szennyeződésektől.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek, hőnek, nedvességnek, tűznek, elektromosságnak stb.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet a vezérlőből.

#### 8. Elemcsere

- Nyissa ki az elemtartó fedelét
- Megfelelően helyezze be az elemet (figyeljen a + és - jelekre)
- Tegye vissza a fedelet
- Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze, hogy működik-e

#### ÖSSZEFOGLALÓ:



1. Nyissa ki az elemtartót



2. Helyezze be az elemeket (2xAAA)



3. Csatlakoztassa a vezérlőt az egységhez



4. Húzza le a védőfóliát



5. Csatlakoztassa a vezérlőt az egységhez



6. Helyezze a szalagot a karjára/lábára