

SÚPRAVA {SIX PACK}

1. Ako toto zariadenie pracuje?

Súprava {Six Pack} využíva malý elektrický prúd na kontrakciu svalov a poskytuje jemnú masáž alebo svaly posilňuje:

- Uvoľníte stuhnuté svaly na ramenách, chrbte a páse
- Zlepšiť svalový tonus
- Masáž

2. Špecifikácie:

Napätie:	alkalická batéria 1,5 V AAA x 2EA
Prevádzkové režimy:	A – F (6 režimov)
Frekvencia:	1 ~ 100 Hz
Trvanie programu:	12 minút
Výkon:	max. 9,8 mA
Rozmery:	21 x 10 x 2,3 cm
Hmotnosť:	57,4 g

3. Vlastnosti produktu:

3.1. Nízkofrekvenčná terapia

Pomocou elektriny vytvára zariadenie nízkofrekvenčný impulz, ktorý má pozitívny vplyv na telo. Nastavte intenzitu podľa svojich predstáv. Nízka frekvencia má na telo jemný, masážny účinok.

3.2. Vyberte zo 6 programov

3.2.1. Jednoducho vyberte zo 6 prevádzkových režimov

3.2.2. Program sa automaticky vypne po 12 minútach

4. Ako sa používa




ON/INC: zapnutie/zvýšenie intenzity

OFF/DEC: vypnutie/zníženie intenzity

PROGRAM: prepínanie medzi programami

Indikátory prevádzkového režimu:

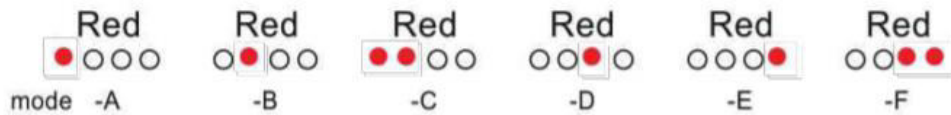

Keď stlačíte tlačidlo „zapnutie/zvýšenie intenzity“, kontrolka začne svietiť jasnejšie a naopak, keď stlačíte tlačidlo „vypnutie/zníženie intenzity“, kontrolka sa oslabne.

- Obe tlačidlá majú 10 úrovní
- Prepínanie medzi programami: vyberte z 6u režimov (A ~ F)
- Keď je batéria prázdna, odoberte kryt z priehradky na batérie a vymeňte batériu a potom kryt znova nasadte späť.

5. Ako súpravu {Six pack} používať

- Vždy ju používajte na čistej a suchej pokožke
- Odstráňte ochranný film z gélových vankúšikov
- Umiestnite prístroj na požadovanú časť tela (brucho, nohy, ramená atď.)

! NEZAPÍNAJTE ZARIADENIE PRED JEHO UMIESTNENÍM NA TELO.

! NEDOTÝKAJTE SA LEPKAVÉHO POVRCHU, ABY STE PREDISLI SKRÁTENIU ŽIVOTNOSTI GÉLOVÝCH VANKÚŠIKOV.

6. Prvé použitie

- Vyberte zariadenie z krabice
- Umiestnite prístroj na požadovanú časť tela
- Vyberte požadovaný program
- Nastavte intenzitu
- Trvanie programu je 12 minút
- Tlačidlo vypínania opakovane stláčajte, kým sa nerozsvieti kontrolka

Najlepšie je používať prístroj až 12 minút na jedenkrát, 2 – 3-krát denne. Ak ho používate dlhšie, môžete sa cítiť unavený.

Nepoužívajte zariadenie 30 minút po jedle, najlepšie je používať prístroj po sprchovaní na čistej a suchej pokožke

7. Starostlivosť

- Po použití prístroj vypnite.
- Na gélové vankúšiky umiestnite ochranný film, aby boli lepkavé a čisté.
- Nečistoty čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

- Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu, teplu, vlhkosti, ohňu, elektrine atď.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.
- Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batériu z ovládača.

8. Výmena batérie

- Otvorte kryt priehradky na batérie
- Batériu vložte správne (pozor na + a -)
- Kryt založte naspäť
- Zapnite zariadenie a skontrolujte, či funguje

SÚHRN:



1. Otvorte kryt priehradky na batérie



2. Vložte batérie (2 x AAA)



3. Pripojte ovládač k jednotke



4. Stiahnite ochranný film



5. Pripojte ovládač k jednotke



6. Umiestnite remienok na ruku/nohu